



cymam[®]

ANTIESCARAS

MOVILIDAD

ASEO

SISTEMAS DE SUJECCIÓN

SISTEMAS DE INMOVILIZACIÓN

DESCANSO

REHABILITACIÓN

ENURESIS

ORTESIS





ANTIESCARAS

COLCHONES



COLCHÓN CON COMPRESOR DE PRESIÓN ALTERNA “OLES”

Características:

El colchón anti escaras tubular Oles es la superficie de presión alterna adecuada para tratar las úlceras por presión de grado II, así como para prevenir la aparición de las mismas cuando el riesgo es medio. La presión alterna a un ritmo adecuado, evita la compresión vascular prolongada que puede causar hipoxia tisular. Así mismo, adapta el colchón al paciente y a su posición.

El compresor dispone de un interruptor que posibilita seleccionar entre presión alterna o estática, así como un indicador luminoso de baja presión.

Incluye kit de reparación de pinchazos.

Destaca por su compresor silencioso (de aluminio) y soportar usuarios de hasta 145 kg.

COD.INT.: EPCAT01





ANTIESCARAS

COLCHONES



Compresor regulable con indicador de baja presión y selector de presión alterna o estática



Filtro de polvo



Fusible y ganchos de sujeción a cama



Sistema anti desconexión.

COMPRESOR		COLCHÓN
Ref.: HF-608A		Ref.: HF-6002-V
Potencia: 220V / 50-60 Hz	Fusible: 1 A	Tamaño: 200 cm. x 90 cm. x 7,0 cm.
Salida de aire: 8 litros / minuto		18-24 celdas tubulares
Rango de presión: 50 mmHg-120 mmHg		Cubierta exterior: Nylon /PU
Tiempo de ciclo: 12 minutos		Celdas de aire: Nylon / PVC
Consumo eléctrico: 7W		PVC grosor: 0,3-0,4 mm.
Indicador luminoso de Baja Presión o Presión Correcta		Color: Azul
Interruptor para alternancia o estático		Peso de la colchoneta: 6 Kg.
Tamaño: 27,5 cm. x 13,5 cm. x 9,0 cm.	Peso: 1,4 Kg.	Peso soportado: 135-145 Kg.





ANTIESCARAS

COLCHONES



COLCHÓN CON COMPRESOR DE PRESIÓN ALTERNA "ONÍS"

Características:

El colchón anti escaras Onís es la superficie de presión alterna adecuada para tratar las úlceras por presión de grado I, así como para prevenir la aparición de las mismas cuando el riesgo es medio-bajo. Sus micro orificios de ventilación en la zona del sacro reducen la maceración de la piel.

El compresor dispone de un interruptor que posibilita seleccionar entre presión alterna o estática, así como un indicador luminoso de baja presión.

Incluye kit de reparación de pinchazos.

Destacado por su colchón con orificios de ventilación y su motor silencioso (aluminio).

COD.INT.: EPCAC03





ANTIESCARAS

COLCHONES



Compresor regulable con indicador de baja presión y selector de presión alterna o estática



Sistema anti desconexión.



Fusible, filtro de polvo y ganchos de sujeción a cama



Micro orificios de ventilación

COMPRESOR		COLCHÓN
Ref.: HF-608A		Ref.: HF-6001V
Potencia: 220V / 50-60 Hz	Fusible: 1 A	Tamaño: 280 cm. x 90 cm. x 6,5 cm.
Salida de aire: 8 litros / minuto		130 celdas de burbuja
Rango de presión: 50 mmHg-120 mmHg		Con solapas de ajuste y orificios de ventilación
Tiempo de ciclo: 12 minutos		Material: PVC (EN-71, toxicidad baja)
Consumo eléctrico: 7W		PVC grosor: 0,3-0,4 mm.
Indicador luminoso de Baja Presión o Presión Correcta		Color: Azul
Interruptor para alternancia o estático		Kit reparación: 2 parches y adhesivo
Tamaño: 27.5 cm. x 13.5 cm. x 9.0 cm. Kg.	Peso: 1,4	Peso soportado: 120-130 Kg.





ANTIESCARAS

COLCHONES



COLCHÓN CON COMPRESOR DE PRESIÓN ALTERNA "OTUR"

Características:

El colchón anti escaras Otur es la superficie de presión alterna adecuada para tratar las úlceras por presión de grado I, así como para prevenir la aparición de las mismas cuando el riesgo es bajo. Incluye kit de reparación de pinchazos.

Destacado por su excelente relación calidad-precio.

COD.INT.: EPCAC04





ANTIESCARAS

COLCHONES



Compresor regulable



Solapas de 40 cm.



Ganchos sujeción a cama



Kit reparación pinchazos

COMPRESOR	COLCHÓN
Ref.: HF-62012	Ref.: HF-6001
Potencia: 220V / 50-60 Hz	Tamaño: 280 cm. x 90 cm. x 7 cm.
Salida de aire: 4-6 litros / minuto	130 celdas de burbuja
Rango de presión: 50 mmHg-120 mmHg	Con solapas de ajuste
Tiempo de ciclo: 12 minutos	Material: PVC Medical Class
Consumo eléctrico: 7W	PVC grosor: 0,3-0,4 mm.
Fusible: 1 A	Color: Beige
Tamaño: 23.5 cm. x 12 cm. x 9.5 cm.	Kit reparación: 2 parches y adhesivo
Peso: 1,4 Kg.	Peso soportado: 120 Kg.





ANTIESCARAS

COJINES



**CUADRADO
SUAPEL**

Base de PU impermeable e ignífugo. Parte superior en poliéster.

COD.INT.: E1500



**CUADRADO HUECO
SUAPEL**

Base de PU impermeable e ignífugo. Parte superior en poliéster.

COD.INT.: E1550



**CIRCULAR
SUAPEL**

Base de PU impermeable e ignífugo. Parte superior en poliéster.

COD.INT.: E1600



**CIRCULAR ABIERTO
SUAPEL**

Base de PU impermeable e ignífugo. Parte superior en poliéster.

COD.INT.: E1650



**CUADRADO
IMPERMEABLE**

Fabricado en PU impermeable e ignífugo. Facilidad de limpieza y desinfección.

COD.INT.: E1700



**CUADRADO HUECO
IMPERMEABLE**

Fabricado en PU impermeable e ignífugo. Facilidad de limpieza y desinfección.

COD.INT.: E1750



**CIRCULAR
IMPERMEABLE**

Fabricado en PU impermeable e ignífugo. Facilidad de limpieza y desinfección.

COD.INT.: E1800



**CIRCULAR ABIERTO
IMPERMEABLE**

Fabricado en PU impermeable e ignífugo. Facilidad de limpieza y desinfección.

COD.INT.: E1850





ANTIESCARAS

COJINES Y PROTECTORES



COJÍN ANTIESCARAS VISCO ANATÓMICO

Fabricado con espuma viscoelástica de densidad 80. Forma anatómica y rebaja en el sacro. Incluye funda realizada en material impermeable.

COD.INT.: ECOVIAN



COJÍN ANTIESCARAS VISCO COXIS

Fabricado con espuma viscoelástica de densidad 65. Forma anatómica con liberación total de presión en la zona del coxis. Incluye dos fundas, una realizada en material impermeable y otra en TENCEL®.

COD.INT.: EPIV06



COJÍN ANTIESCARAS VISCO 3D

Fabricado con espuma viscoelástica de densidad 50. Funda realizada en material 3D totalmente transpirable.

COD.INT.: ECOVI3D



PROTECTOR ANTIESCARAS CODO-TALÓN

Fabricado en Velour foamizado. Se ajusta a todas las medidas gracias a su cierre de velcro.

COD.INT.: E2700





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



SILLA ALUMINIO AUTOPROPULSABLE “LLANES”

Características:

Silla de aluminio plegable con apoyabrazos abatibles y apoya pies extraíbles y regulables en altura. Ruedas delanteras de PU de 200 x 50 mm. y traseras de 600 mm. de PU anti pinchazos con sistema de extracción rápida (QR). Tapicería en nylon color negro.

Destaca por su ligereza (14 Kg.) y soportar hasta 135 Kg.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPSL640	Ancho de asiento 40 cm.
EPSL643	Ancho de asiento 43 cm.
EPSL646	Ancho de asiento 46 cm.
EPSL648	Ancho de asiento 48 cm.
EPSL651	Ancho de asiento 51 cm.





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



Apoyabrazos de escritorio abatible



Sistema de extracción rápida (QR)



Freno de usuario



Empuñaduras antideslizantes



Bolso porta objetos en la parte trasera



Apoya pies extraíbles y regulables en altura

Longitudes cm. Peso Kg.												PESO SILLA
EPSL640	40	46	43	45	29	40	57	96	105	31	135	14
EPSL643	43	46	43	45	29	43	60	96	105	31	135	14
EPSL646	46	46	43	45	29	46	63	96	105	31	135	14
EPSL648	48	46	43	45	29	48	65	96	105	31	135	14
EPSL651	51	46	43	45	29	51	68	96	105	31	135	14





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



SILLA ALUMINIO ACOMPAÑANTE “LLANES”

Características:

Silla de aluminio plegable con apoyabrazos abatibles y apoya pies extraíbles y regulables en altura. Ruedas delanteras de PU de 200 x 50 mm. y traseras de 300 mm. de PU anti pinchazos con sistema de extracción rápida (QR). Tapicería en nylon color negro.

Destaca por su ligereza (14 Kg.) y soportar hasta 135 Kg.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPSL340	Ancho de asiento 40 cm.
EPSL343	Ancho de asiento 43 cm.
EPSL346	Ancho de asiento 46 cm.
EPSL348	Ancho de asiento 48 cm.
EPSL351	Ancho de asiento 51 cm.





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



Apoyabrazos de escritorio abatible



Sistema extracción rápida (QR)



Freno de usuario



Empuñaduras antideslizantes



Bolso porta objetos en la parte trasera



Apoya pies extraíbles y regulables en altura

Longitudes cm. Peso Kg.												PESO SILLA
EPSL340	40	46	43	45	29	40	54	96	105	31	135	14
EPSL343	43	46	43	45	29	43	57	96	105	31	135	14
EPSL346	46	46	43	45	29	46	60	96	105	31	135	14
EPSL348	48	46	43	45	29	48	62	96	105	31	135	14
EPSL351	51	46	43	45	29	51	65	96	105	31	135	14





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



SILLA ACERO LIGERO ACOMPAÑANTE “NOEGA”

Características:

Silla de acero ligero plegable con apoyabrazos abatibles y apoya pies extraíbles y regulables en altura. Incluye un sistema de doble freno: manual y acompañante. Ruedas delanteras de PU de 200 x 50 mm. y traseras de 300 mm. de PU anti pinchazos. Tapicería en nylon color negro.

Destaca por incluir frenos de acompañante, cinturón y soportar hasta 135 Kg.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPSAC40	Ancho de asiento 40 cm.
EPSAC43	Ancho de asiento 43 cm.
EPSAC46	Ancho de asiento 46 cm.
EPSAC48	Ancho de asiento 48 cm.
EPSAC51	Ancho de asiento 51 cm.





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



Apoyabrazos de
escritorio abatible



Freno de
acompañante



Freno de usuario



Cinturón de
seguridad



Bolso porta objetos
en la parte trasera



Apoya pies extraíbles y
regulables en altura

Longitudes cm. Peso Kg.												PESO SILLA
EPSAC40	40	46	43	45	29	40	54	96	105	31	135	17
EPSAC43	43	46	43	45	29	43	57	96	105	31	135	17
EPSAC46	46	46	43	45	29	46	60	96	105	31	135	17
EPSAC48	48	46	43	45	29	48	62	96	105	31	135	17
EPSAC51	51	46	43	45	29	51	65	96	105	31	135	17





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



SILLA DE ACERO LIGERO AUTOPROPULSABLE “DEVA”

Características:

Silla de acero ligero plegable con apoyabrazos abatibles y apoya pies extraíbles y regulables en altura. Ruedas delanteras de PU de 200 x 50 mm. y traseras de 600 mm. de PU anti pinchazos con sistema de extracción rápida. Tapicería en nylon color negro.

Destaca por sus ruedas de extracción rápida y soportar hasta 135 Kg.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPSPC40	Ancho de asiento 40 cm.
EPSPC43	Ancho de asiento 43 cm.
EPSPC46	Ancho de asiento 46 cm.
EPSPC48	Ancho de asiento 48 cm.
EPSPC51	Ancho de asiento 51 cm.





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



Apoyabrazos de escritorio abatible



Freno de usuario



Catadióptricos. Llanta, aro y radios de acero



Extracción rápida.



Apoya pies extraíbles y regulables en altura



Bolso porta objetos en la parte trasera

Longitudes cm. Peso Kg.												PESO SILLA
EPSPC40	40	49	43	45	29	40	57	96	105	31	135	17
EPSPC43	43	49	43	45	29	43	60	96	105	31	135	17
EPSPC46	46	49	43	45	29	46	63	96	105	31	135	17
EPSPC48	48	49	43	45	29	48	65	96	105	31	135	17
EPSPC51	51	49	43	45	29	51	68	96	105	31	135	17





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



SILLA ALUMINIO ACOMPAÑANTE "GIGIA"

Características:

Silla de aluminio plegable ligera con apoyabrazos fijos y apoya pies extraíbles y regulables en altura. Respaldo abatible. Incluye doble freno: manual y acompañante con sistema de bloqueo. Ruedas delanteras de 200 mm. y traseras de 300 mm. de PU anti pinchazos. Tapicería en nylon color negro.

Destaca por su doble sistema de freno (usuario y acompañante).

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPSAL43	Ancho de asiento 43 cm.
EPSAL46	Ancho de asiento 46 cm.





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



Empuñadura
anatómica y freno
de acompañante



Respaldo abatible y
freno de usuario



Cinturón de
seguridad



Apoya pies extraíbles y
regulables en altura



Bolso porta objetos
en la parte trasera



Plegado compacto
70 x 70 x 25

Longitudes cm. Peso Kg.												PESO SILLA
EPSAL43	43	49.5	40	48	24	43	51	99	97	27	110	12
EPSAL46	46	49.5	40	48	24	46	54	99	97	27	110	12





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



SILLA ALUMINIO AUTOPROPULSABLE “NAVA”

Características:

Silla de aluminio plegable extremadamente ligera (peso total 12 Kg.) con apoyabrazos fijos y apoyapies de aluminio, fijos y regulables en inclinación. Ruedas delanteras macizas de PVC de 150 mm. y traseras de PU anti pinchazos de 500 mm. Tapicería en nylon color negro.

Destaca por su ligereza (12Kg) y su plegado compacto para un fácil transporte.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPSPL41	Ancho de asiento 41 cm.
EPSPL46	Ancho de asiento 46 cm.





MOVILIDAD

SILLAS DE RUEDAS



Freno de acompañante



Freno de usuario



Apoya pies de inclinación regulable



Doble cruceta



Bolso porta objetos en la parte trasera



Plegado compacto
78 x 65 x 32

Longitudes cm. Peso Kg.												PESO SILLA
EPSPL41	41	43	38	45	23	40	58	91	100	32	100	12
EPSPL46	46	43	38	45	23	46	63	91	100	32	100	12





MOVILIDAD

ROLLATORS



ROLLATOR CON FRENO DE PRESIÓN "BULNES"

Características:

Rollator muy ligero y maniobrable fabricado en aluminio. Fácil de plegar y guardar.

Incorpora asiento acolchado con respaldo y cesta porta objetos.

Destaca por sus ruedas delanteras dobles que giran 360°.

COD.INT.: EPRLP02





MOVILIDAD

ROLLATORS



**Empuñadura anatómica
regulable en altura**



**Ruedas dobles
delanteras giratorias**



**Doble rueda trasera con
freno por presión**



Respaldo acolchado



**Asiento y cesta porta
objetos con bandolera**



Plegado compacto

Especificaciones técnicas	Rollator Bulnes
Dimensiones (largo-ancho-alto)	62 cm. x 61 cm. x 79-91 cm.
Peso	5.8 Kg.
Material	Aluminio
Color	Azul
Altura del asiento al suelo	54 cm.
Diámetro contera entre ruedas traseras	25 mm.
Peso máximo soportado	100 Kg.





MOVILIDAD

ROLLATORS



ROLLATOR CON FRENO MANUAL "TANES"

Características:

Rollator muy ligero y maniobrable fabricado en aluminio. Fácil de plegar y guardar.

Incorpora asiento acolchado con respaldo y cesta porta objetos.

Destaca por sus ruedas de 6" e incluir sistema de freno en puño.

COD.INT.: EPRLM02





MOVILIDAD

ROLLATORS



**Empuñadura anatómica
regulable en altura**



**Ruedas delanteras
giratorias de 6"**



Freno manual



Respaldo acolchado



**Asiento y cesta porta
objetos con bandolera**



Plegado compacto

Especificaciones técnicas	Rollator Tanes
Dimensiones (largo-ancho-alto)	76 cm. x 64 cm. x 81-92 cm.
Peso	5.8 Kg.
Material	Aluminio
Color	Azul
Altura del asiento al suelo	50 cm.
Peso máximo soportado	100 Kg.





MOVILIDAD

ANDADORES



ANDADOR ACERO CON ASIENTO “OSCOS”

Características:

Andador ligero, estable y maniobrable fabricado en acero. Ajuste de altura micrométrico. Fácil de plegar y guardar. Incorpora asiento acolchado. Diámetro de contera: 22 mm.

Destaca por su estabilidad, robustez y ligereza.

COD.INT.: EPAA01





MOVILIDAD

ANDADORES



**Empuñadura anatómica
regulable en altura**



Asiento acolchado



Rueda delantera



Plegado compacto

Especificaciones técnicas	Andador Oscos
Dimensiones (largo-ancho-alto)	47 cm. x 58 cm. x 79-89 cm.
Peso	5 Kg.
Material	Acero
Color	Verde
Altura del asiento al suelo	50 cm.
Diámetro contera trasera	22 mm.
Peso máximo soportado	100 Kg.






MOVILIDAD

MULETILLAS PLEGABLES



MULETILLA PLEGABLE

Muletilla plegable fabricada en aluminio y con acabados lisos monocromos. Puño anatómico blando y ambidiestro. Incluye cinta porta bastón. Regulable entre 82 y 92 cm. Diámetro de contera: 19 mm.

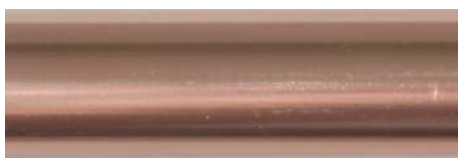

COD.INT.: EPMPLO1



COD.INT.: EPMPLO5



COD.INT.: EPMPLO3



COD.INT.: EPMPLO6



COD.INT.: EPMPLO4



COD.INT.: EPMPLO7





MOVILIDAD

Alu-
minio

MULETILLAS EXTENSIBLES



COD.INT.: EPMEL01



COD.INT.: EPMEL02



COD.INT.: EPMEL05



COD.INT.: EPMEL06



COD.INT.: EPMEL07



COD.INT.: EPMEL08

MULETILLA EXTENSIBLE

Muletilla extensible fabricada en aluminio y con acabados lisos monocromos. Puño anatómico blando y ambidiestro. Incluye cinta porta bastón. Regulable entre 72 y 95 cm. Diámetro de contera: 19 mm.



MULETILLA EXTENSIBLE

Muletilla extensible fabricada en tubo ovalado y estriado de aluminio con acabado liso negro. Regulable entre 70 y 93 cm. Diámetro de contera: 14 mm.

COD.INT.: EPMEL04





MOVILIDAD

MULETA AXILAR



MULETA AXILAR

Empuñadura regulable en 5 alturas.

Altura total regulable en 9 alturas.

Facilita la deambulación a personas con movilidad reducida.

Diámetro contera: 22 mm.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
EPMAL	Muleta axilar grande
EPMAM	Muleta axilar mediana
EPMAS	Muleta axilar pequeña





MOVILIDAD

BASTÓN INGLÉS



BASTÓN INGLÉS BIRREGULABLE

Regulable en la parte superior en tres posiciones y en la inferior entre 64 y 98 cm. Facilita la deambulación a personas con movilidad reducida. Diámetro contera: 18 mm.

COD.INT.: E1070



BASTÓN INGLÉS BIRREGULABLE CODERA ARTICULADA

Regulable en la parte superior en tres posiciones y en la inferior entre 64 y 98 cm. Provisto de pinza de antebrazo para facilitar su uso a personas con movilidad reducida. Diámetro contera: 18 mm.


COD.INT.: E1090





MOVILIDAD

REPUESTOS Y ACCESORIOS

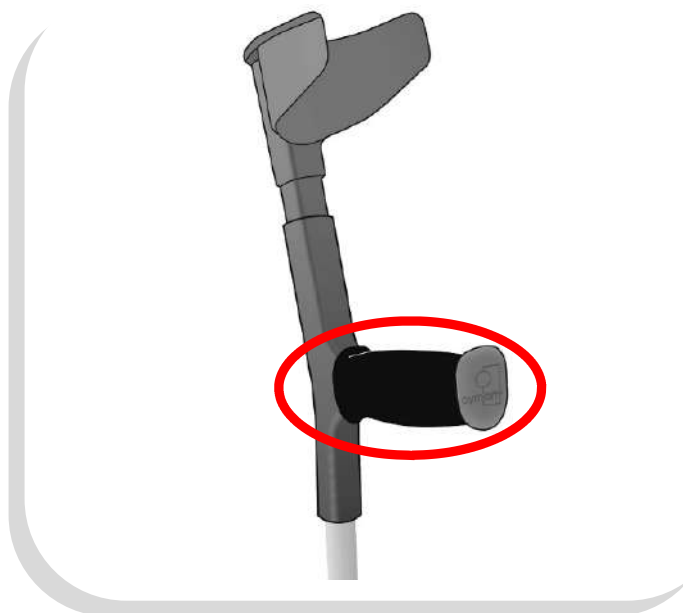

PROTECTOR DE MANO PARA BASTÓN

Indicado para proteger la mano y musculatura del antebrazo durante el uso continuado de bastones en la deambulación.

COD.INT.: E1000



CONTERA PVC 18

Fabricada en PVC antideslizante. Se recomienda sustituir frecuentemente según desgaste. Diámetro de contera: 18 mm.

COD.INT.: E5100N18



CLAN

Pasador de seguridad.

COD.INT.: E5050





MOVILIDAD

REPUESTOS Y ACCESORIOS



CONTERA CAUCHO 19

Contera de caucho. Válida para muletillas extensibles y plegables. Diámetro de contera: 19 mm.

COD.INT.: ER0014



CONTERA CAUCHO 22

Contera de caucho. Válida para andador Ocos y muletas axilares. Diámetro de contera: 22 mm.

COD.INT.: ER0015



CONTERA CAUCHO 25

Contera de caucho. Válida para rollator Bulnes. Diámetro de contera: 25 mm.

COD.INT.: ER0016



CONTERA PU BASCULANTE

Fabricada en PU y con refuerzo de acero. Facilita la deambulación en terrenos irregulares. Diámetro de contera: 19 mm.

COD.INT.: ECONBAS



CONTERA PU MAXI TREKKING

Fabricada en PU y con refuerzo de acero. Facilita la deambulación en terrenos irregulares. Diámetro de contera: 25 mm.

COD.INT.: ECONMTR



CONTERA BAÑO PU 25

Fabricada en PU. Antideslizante. La contera plana es válida para el taburete Sella. La contera inclinada es válida para el resto de taburetes y sillas de ducha. Diámetro de contera: 25mm.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
ER0017	Contera inclinada
ER0018	Contera plana





MOVILIDAD

REPUESTOS Y ACCESORIOS



RUEDA DELANTERA 150x20 PVC

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PVC.

COD.INT.: ERRROL



RUEDA DELANTERA 200x30 PVC

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PVC.

COD.INT.: ERRD2



RUEDA DELANTERA 200x50 PU

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PU.

COD.INT.: ERRD2N



RUEDA TRASERA 300 PU

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PU.

COD.INT.: ERRT3



RUEDA TRASERA 300 PU QR

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PU. Sistema QR.

COD.INT.: ERRT3QR



RUEDA TRASERA 500 PU ALUMINIO

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PU.

COD.INT.: ERRT5



RUEDA TRASERA 600 PU QR ACERO

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PU. Sistema QR. Acero.

COD.INT.: ERRT6QRA



RUEDA TRASERA 600 PU QR ALUMINIO

Rueda maciza, anti pinchazos fabricada en PU. Sistema QR. Aluminio.

COD.INT.: ERRT6QRL





MOVILIDAD

REPUESTOS Y ACCESORIOS



EMPUÑADURA ANATÓMICA

Empuñadura anatómica. Válida para sillas y caminadores con tubo de 22 mm. de diámetro.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
ERPAD	Mano derecha.
ERPAI	Mano izquierda.



REPOSAPIÉS ELEVABLE MODELOS NOEGA DEVA LLANES

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
ERRPD2	Pierna derecha.
ERRPI2	Pierna izquierda.



REPOSAPIÉS ELEVABLE MODELO GIGIA

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
ERRPD	Pierna derecha.
ERRPI	Pierna izquierda.





ASEO

SILLAS DE RUEDAS



SILLA DE DUCHA-WC CON RUEDAS PLEGABLE “ERCINA”

Características:

Ideal para aquellos usuarios con movilidad reducida que requieren una solución integral. Su diseño, le confiere gran versatilidad convirtiéndola en una opción perfecta para la mayoría de hogares. Provista de cuatro ruedas con giro de 360 grados, destaca por su maniobrabilidad y facilidad de uso como silla de interior. La incorporación de una cubeta de inodoro y su fabricación en aluminio y PVC sanitario, permiten su utilización en la ducha y como silla de WC.

Aviso importante: La barra oscilante trasera debe estar situada SIEMPRE en el anclaje inferior salvo en el momento de utilizarse sobre el WC.

Destaca por su polivalencia, ligereza, maniobrabilidad y plegado compacto.

COD.INT.: EPSBPH02





ASEO

SILLAS DE RUEDAS



Silla sobre el WC.



Plegado compacto.



Tapas de asiento y cubeta



Reposabrazos y reposapiés abatibles.

Especificaciones técnicas	Silla ducha-WC Ercina
Dimensiones (largo-ancho-alto)	58 cm. x 54 cm. x 90 cm.
Peso	7,5 Kg.
Materiales	Aluminio y PVC sanitario
Color	Blanco
Altura del asiento al suelo	50 cm.
Peso máximo soportado	100 Kg.





ASEO

TABURETES Y SILLAS



TABURETE ENOL

Fabricado en aluminio y PVC. Provisto de soporte para ducha. Graduable de 40 a 50 cm. Montaje sin herramientas. Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPTBC01



TABURETE CARES

Fabricado en aluminio y PVC. Graduable de 37 a 56 cm. Montaje sin herramientas. Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPTBH01



SILLA ALBA

Fabricada en aluminio y PVC. Altura graduable de 37 a 56 cm. Montaje sin herramientas. Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPSBC01



SILLA NARCEA

Fabricada en aluminio y PVC. Altura graduable de 35 a 55 cm. Montaje sin herramientas. Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPSBH01





ASEO

TABURETES Y TABLAS



TABURETE PLEGABLE NALÓN

Fabricado en aluminio y PVC. Altura graduable de 47 a 26 cm. Montaje sin herramientas. Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPTBP01



TABURETE REDONDO SELLA

Fabricado en aluminio y PVC. Graduable de 38 a 55 cm. Montaje sin herramientas. Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPTR01



TABLA DE BAÑERA "LENA"

Características:

Tabla de bañera fabricada en polipropileno. Ajustable al ancho interior de la bañera. Asa interior.

COD.INT.: EPTB01





ASEO

ASIENTOS



ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA "CAUDAL"

Características:

Lleva reposabrazos integrados y una palanca con 4 posiciones que puede bloquear el giro del asiento. El diseño del asiento impide deslizamientos y evacua el agua. Dos tornillos acolchados, lo aseguran en el interior de la bañera. Fabricado en acero inoxidable.

Dimensiones: Ancho total: 70 cm. Fondo total: 54 cm. Ancho asiento: 46 cm. Peso: 4.3 Kg.

Peso máximo usuario: 100 Kg.

Destaca por su estructura de acero inoxidable y facilidad de uso.

COD.INT.: EPAG01





ASEO

ELEVADORES DE INODORO



ELEVADOR DE INODORO

Fabricado en PVC sanitario.
Anclaje universal.
Montaje sin herramientas.
Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPEI10	Elevador 10 cm.
EPEI15	Elevador 15 cm.



ELEVADOR DE INODORO CON TAPA

Fabricado en PVC sanitario.
Anclaje universal.
Montaje sin herramientas.
Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
EPEI10T	Elevador 10 cm. con tapa
EPEI15T	Elevador 15 cm. con tapa



ELEVADOR DE INODORO CON BRAZOS

Fabricado en PVC sanitario.
Anclaje frontal universal.
Montaje sin herramientas.
Peso máximo usuario: 100 Kg.

COD.INT.: EPEI10B





SISTEMAS DE SUJECCIÓN

CINTURONES Y CHALECOS



CINTURÓN ABDOMINAL

Composición: nylon cordura y antelina. Cierre tridente. Talla única.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
E2100	Cinturón abdominal silla
E2100ESP	Cinturón abdominal sillón.



CINTURÓN PÉLVICO

Composición: nylon cordura y antelina. Cierre tridente. Talla única.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
E2101	Cinturón pélvico silla
E2101ESP	Cinturón pélvico sillón.



CINTURÓN ABDOMINAL CON TIRANTES

Composición: nylon cordura y antelina. Cierre tridente. Talla única.

COD. INT.: E2102



CINTURÓN PÉLVICO CON TIRANTES

Composición: nylon cordura y antelina. Cierre tridente. Talla única.

COD. INT.: E2103



CHALECO

Composición: nylon cordura y antelina. Cierre tridente. Talla única.

COD. INT.: E2104



CHALECO PÉLVICO

Composición: nylon cordura y antelina. Cierre tridente. Talla única.

COD. INT.: E2105





SISTEMAS DE INMOVILIZACIÓN

INMOVILIZADORES CON IMÁN



INMOVILIZADOR DE TRONCO CON IMÁN

Para evitar caídas y movimientos no deseados en pacientes con diferentes patologías.

COD. INT.	DESCRIPCIÓN
E2040	Cama de 90 cm.
E2040ESP	Cama de 135 cm.



INMOVILIZADOR DE MUÑECAS CON IMÁN

Evita que determinados pacientes se puedan lesionar o acceder a vías, sondas o pañales.

COD.INT.: E2050



INMOVILIZADOR DE PIÉS CON IMÁN

Evita que determinados pacientes puedan agredir o lesionarse.

COD.INT.: E2060

LLAVE PARA INMOVILIZADOR DE IMÁN

COD.INT.: E0002



BOTÓN PARA INMOVILIZADOR DE IMÁN

COD.INT.: E0001





DESCANSO

ALMOHADAS Y COJINES



COJÍN-ALMOHADA TUBULAR

Fabricada con poliuretano suave troceado y forrada con una funda lavable de popelín. Permite múltiples usos, como almohada cervical, bajo rodillas o tobillos. Medidas: 45 x 15 cm.

COD.INT.: E6500



ALMOHADA CERVICAL VISCO

Núcleo de visco e inyección de carbono que evita los olores de la sudoración. Funda interior 100% PES elástico. Funda exterior: 25% Tencel®, 75% fibra de poliéster. Medidas: 70 x 30 x 9,5-12,5 cm.

COD.INT.: EPIV08



COJÍN POSTURAL RODILLAS

Mantiene separadas las rodillas descargando la cadera. Composición interior: Espuma visco elástica con carbono (reduce la oxidación y evita malos olores) de densidad 65. Funda: 25% Tencel®, 75% fibra de poliéster. Medidas: 26 x 28 x 5-14.

COD.INT.: EPIV02





DESCANSO

ALMOHADAS Y COJINES



COJÍN LUMBAR VISCO

Descarga la zona lumbar durante la sedestación. Composición interior: Visco de densidad 65. Funda: 25% Tencel®, 75% fibra de poliéster. Medidas 39 x 34 x 10 cm.

COD.INT.: EPIV04



COLLARÍN VISCO DE VIAJE

Su diseño en forma de herradura, proporciona soporte y confort al cuello. Funda transpirable. Composición interior: Visco de densidad 65. Funda: 25% Tencel®, 75% fibra de poliéster.

COD.INT.: EPIV01



COJÍN ANATÓMICO DE POSICIONAMIENTO

Fabricado en EVA y con funda de nylon. Mantiene correctamente posicionados espalda y sacro durante la sedestación.

COD.INT.: EPCAP01





REHABILITACIÓN

STOP STRESS



BOLA DE GOLF

COD.INT.: EPSBG02



BOLA DE TENIS

COD.INT.: EPSBT01



BALÓN DE RUGBY

COD.INT.: EPSBR03



GUANTE DE BOXEO

COD.INT.: EPSBX05



HAND GRIP

COD.INT.: EPSBHG06





REHABILITACIÓN

STOP STRESS



FORMAS ANTI STRESS Y REHABILITACIÓN

Contenido:

COD.INT.	DESCRIPCIÓN	UDS
EPSBHG	Hand grip azul.	3
EPSBG02	Golf verde.	3
EPSBR03	Rugby morado.	3
EPSBT01	Tenis amarillo.	3
EPSBX05	Boxeo rojo.	3

Características:

Formas fabricadas en FOAM de alta calidad. Cada una de las formas está indicada para patologías o situaciones diferentes. Desarrollo físico (movilidad). Terapia física. Terapia ocupacional. Desarrollo mental. Rehabilitación neurocognitiva. Desarrollo social. Psicoterapia individual y grupal. Grupo de apoyo. Terapia alterna o medicina alternativa.

COD.INT.: EPSBEXP





ENURESIS

WET-STOP 3



ALARMA DE ENURESIS WET-STOP 3

Características:

Wet-Stop 3 consta de una unidad de alarma con una pinza de soporte magnético que permite su fácil colocación sobre cualquier camiseta o pijama. La alarma está unida mediante un cable de conexión a un sensor que detecta la humedad provocada por la orina. Dicho sensor está diseñado con un sistema de pinza que permite fijarlo convenientemente en los pantalones del pijama o en la ropa interior. Vibración y 5 alarmas diferentes para evitar que el niño se acostumbre al sonido.

COD.INT.: EPPSA03





ENURESIS

WET-STOP 3



Unidad de alarma



Unidad de alarma
cierre de imán



Sensor humedad



Cable conexión con
el sensor



Sistema de
recompensas





ORTESIS

NEOPRENO



MUÑEQUERA CORTA

Se ajusta mediante velcro y hebilla para asegurar estabilidad y confort durante su uso.
Talla única.

COD.INT.: E4100



MUÑEQUERA METAPULGAR

Provista de un fleje a nivel pulgar.
Tratamiento de la rizartrosis.
Talla única bilateral.

COD.INT.: E4200



CODERA CON CINTA VELCRO

La presión sobre los epicóndilos se regula con la cinta de velcro según necesidad.
Talla única.

COD.INT.: E4300



MUSLERA

Soporte térmico para patología muscular en el muslo: contracturas, roturas fibrilares, etc.
Talla única.

COD.INT.: E4600





ORTESIS

NEOPRENO



RODILLERA ROTULAR

Es ideal para problemas articulares cuando es necesario descargar la presión rotular.
Talla única.

COD.INT.: E4500



RODILLERA CERRADA

Indicada para problemas degenerativos articulares y derrames repetidos.
Talla única.

COD.INT.: E4400



BANDA ABDOMINAL

Ofrece soporte térmico y compresión a la zona lumbar. Gran confort. Altura: 21 cm.
Talla única.

COD.INT.: E4700



TOBILLERA CON VENDA

Provista de venda elástica que permite estabilizar el tobillo de forma adecuada.
Talla única.

COD.INT.: E4800





ORTESIS

NEOPRENO



(Anterior)

FAJA SACROLUMBAR

(Posterior)

Provista de cuatro flejes flexibles que favorece su adaptación y facilita el uso continuado. Diseñada para proteger la zona lumbar durante el ejercicio físico. Altura: 24 cm. Talla única.

COD.INT.: E4900



(Anterior)

FAJA REFORZADA

(Posterior)

Diseñada para proteger la zona lumbar durante el ejercicio físico. Provista de cuatro flejes flexibles. Disponible en cinco tallas para garantizar una perfecta adaptación a todos los pacientes. Altura: 28 cm.

Talla	S	M	L	XL	XXL
cm.	<79	80-89	90-99	100-109	>110
COD. INT.	E4910S	E4910M	E4910L	E4910XL	E4910XXL





ORTESIS

NEOPRENO



EXPOSITOR LÍNEA MEDICINA DEPORTIVA

COD.INT.: E4950

COD.INT.	Descripción	Cantidad	Bonificación
E4100	Muñequera corta. Talla única.	2	3
E4200	Muñequera metapulgar. Talla única.	3	
E4300	Codera con cinta velcro. Talla única.	1	
E4400	Rodillera cerrada. Talla única.	2	
E4500	Rodillera rotular. Talla única.	2	
E4600	Muslera. Talla única.	1	
E4800	Tobillera con venda. Talla única.	3	
E4700	Banda abdominal. Talla única.	2	
E4900	Faja sacrolumbar. Talla única.	1	





ORTESIS

LINEA ELÁSTICA



RODILLERA

Indicada para cualquier patología que requiera inmovilización ligera o compresión.
Longitud: 150 cm. Talla única.

COD.INT.: E2710



CODERA

Indicada para cualquier patología que requiera inmovilización ligera o compresión.
Longitud: 90 cm. Talla única.

COD.INT.: E2720



MUÑEQUERA

Indicada para cualquier patología que requiera inmovilización ligera o compresión.
Longitud: 40 cm. Talla única.

COD.INT.: E2730



TOBILLERA

Indicada para cualquier patología que requiera inmovilización ligera o compresión. Longitud: 90 cm. Talla única.

COD.INT.: E2740





ORTESIS

LINEA ELÁSTICA



EXPOSITOR LÍNEA ELÁSTICA

COD.INT.: E2750

COD.INT.	Descripción	Cantidad	Bonificación
E2710	Rodillera. Talla única.	4	1
E2720	Codera. Talla única.	2	
E2730	Muñequera. Talla única.	6	1
E2740	Tobillera. Talla única.	6	1





ORTESIS

CORRECTOR NOCTURNO



CORRECTOR NOCTURNO

Indicado para la corrección nocturna del Hallux-Valgus.



EXPOSITOR CORRECTOR NOCTURNO

COD.INT.: E7009

COD.INT.	DESCRIPCIÓN
E7001-D	Corrector nocturno. Talla 1. Derecho.
E7001-I	Corrector nocturno. Talla 1. Izquierdo.
E7002-D	Corrector nocturno. Talla 2. Derecho.
E7002-I	Corrector nocturno. Talla 2. Izquierdo.

COD.INT.	DESCRIPCIÓN	UDS
E7001-D	Corrector nocturno. Talla 1. Derecho.	3
E7001-I	Corrector nocturno. Talla 1. Izquierdo.	3
E7002-D	Corrector nocturno. Talla 2. Derecho.	3
E7002-I	Corrector nocturno. Talla 2. Izquierdo.	3





ORTESIS

CABESTRILLOS



RATIER

Los cabestrillos están indicados para proporcionar descarga de hombro y brazo, procesos inflamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero, sujeción de brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro superior.

Talla única.

COD.INT.: E2146



DOS PIEZAS

Los cabestrillos están indicados para proporcionar descarga de hombro y brazo, procesos inflamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero, sujeción de brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro superior.

Talla única.

COD.INT.: E2135



CERRADO

Los cabestrillos están indicados para proporcionar descarga de hombro y brazo, procesos inflamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero, sujeción de brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro superior.

Talla	S	M	L
cm.	0-38	39-41	42-44
COD. INT.	E2140S	E2140M	E2140L



INMOVILIZADOR SLING

Los cabestrillos están indicados para proporcionar descarga de hombro y brazo, procesos inflamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero, sujeción de brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro superior.

COD.INT.: E2145



[illegible]